

## SPOSTARE IATROS DA UN PC AD UN ALTRO

Se si dispone di connessione Adsl sufficientemente veloce e/o tempo di attesa, prelevare il **pacchetto completo** disponibile nell'area download del sito [www.iatros.it](http://www.iatros.it) ( ~270Mb).

In caso contrario installare i seguenti pacchetti autenticandosi qui: [www.iatros.it/download.html](http://www.iatros.it/download.html)


A-**Setup Pervasive 8** per sistemi a 32 e 64 bit ~23Mb;

B-**Setup Librerie** ~20Mb.

I passaggi rimanenti sono relativi alla copia dei files dal vecchio PC. Identificare dove risiedono gli archivi correntemente utilizzati con i metodi sottostanti.


### ->Metodo 1: Iatros funzionante.

Avviare Iatros ed ingrandire la sua finestra a tutto schermo. In basso è visibile l'elenco delle posizioni delle impostazioni e degli archivi.

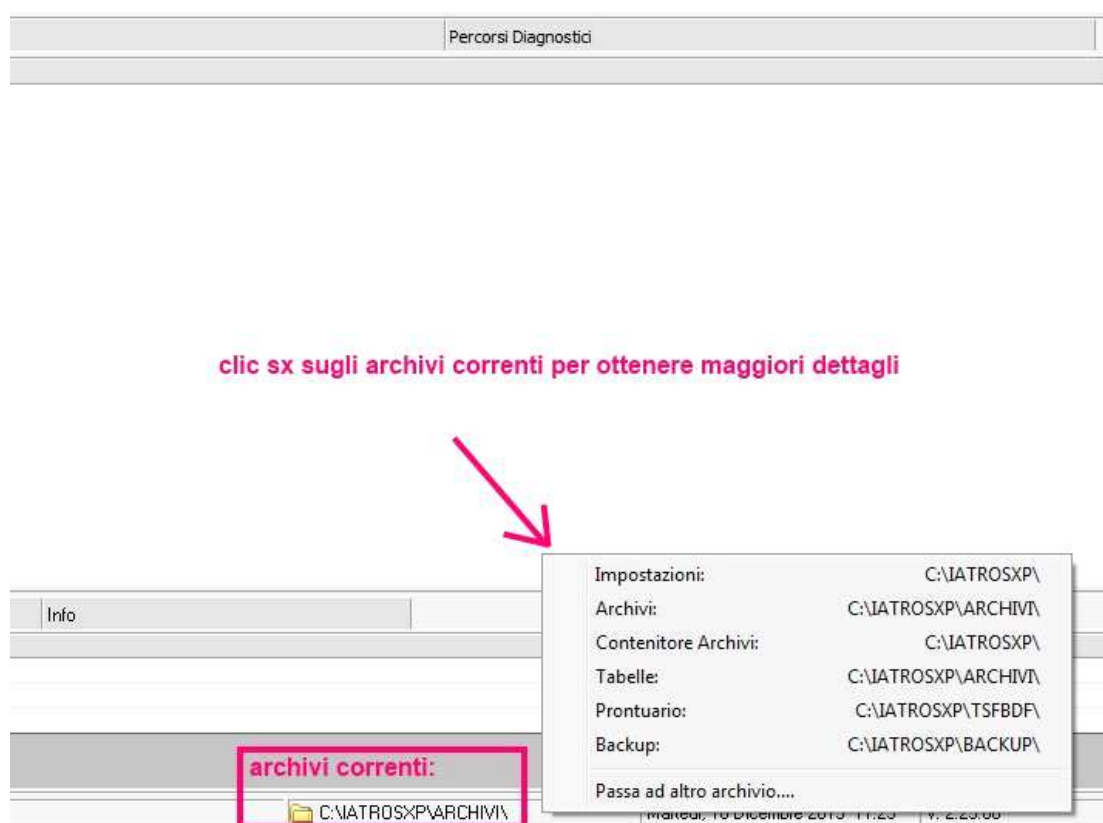


[REV.12122013RB]

Premere la seguente icona per avere l'elenco degli archivi secondari a disposizione.

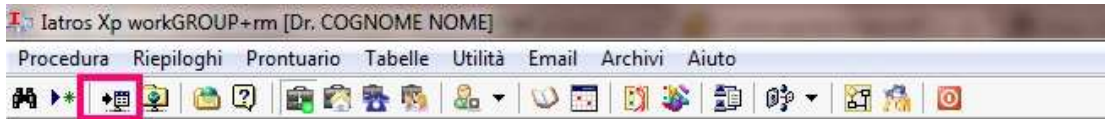

Se risiedono nel PC in uso, quindi localmente, copiare anche loro.

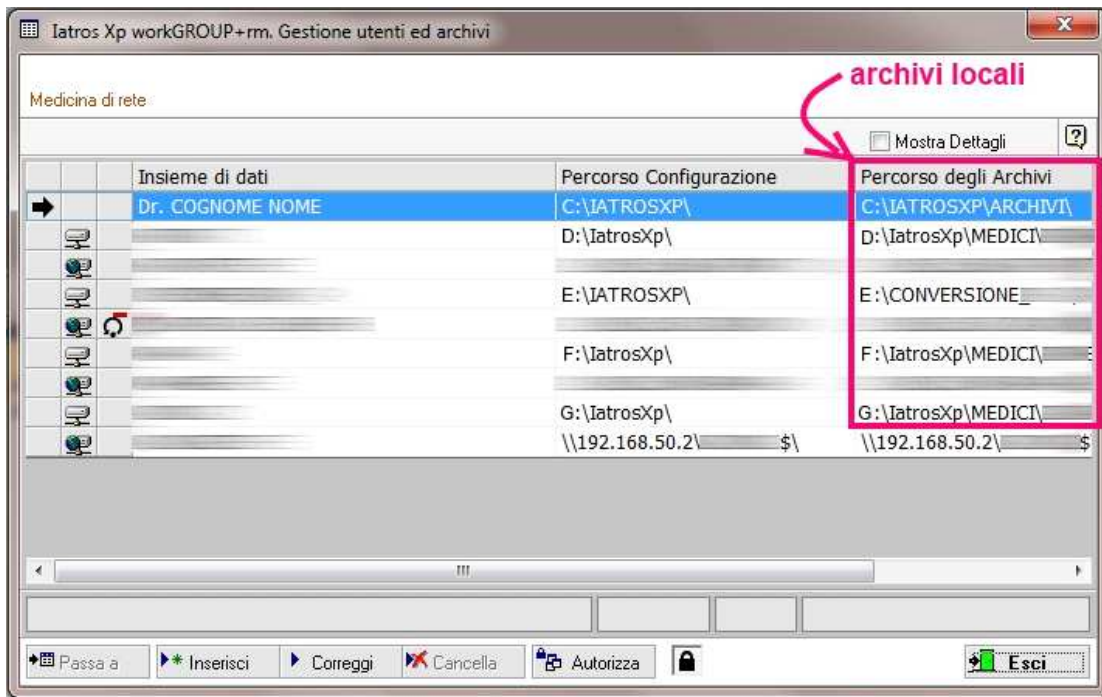


[REV.12122013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112


TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

## ->Metodo 2: Iatros non funzionante

Accedere al setup di iatros tramite start menu di Windows.

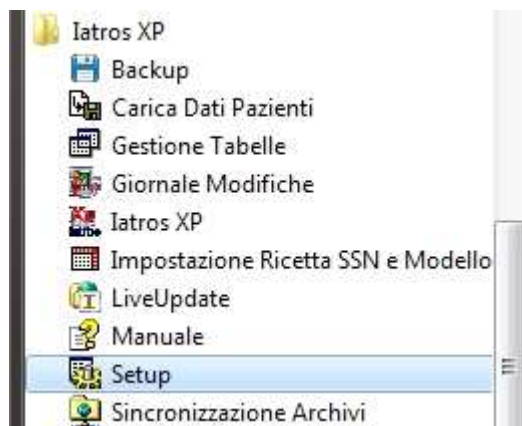

Controllare i percorsi degli archivi e delle tabelle.

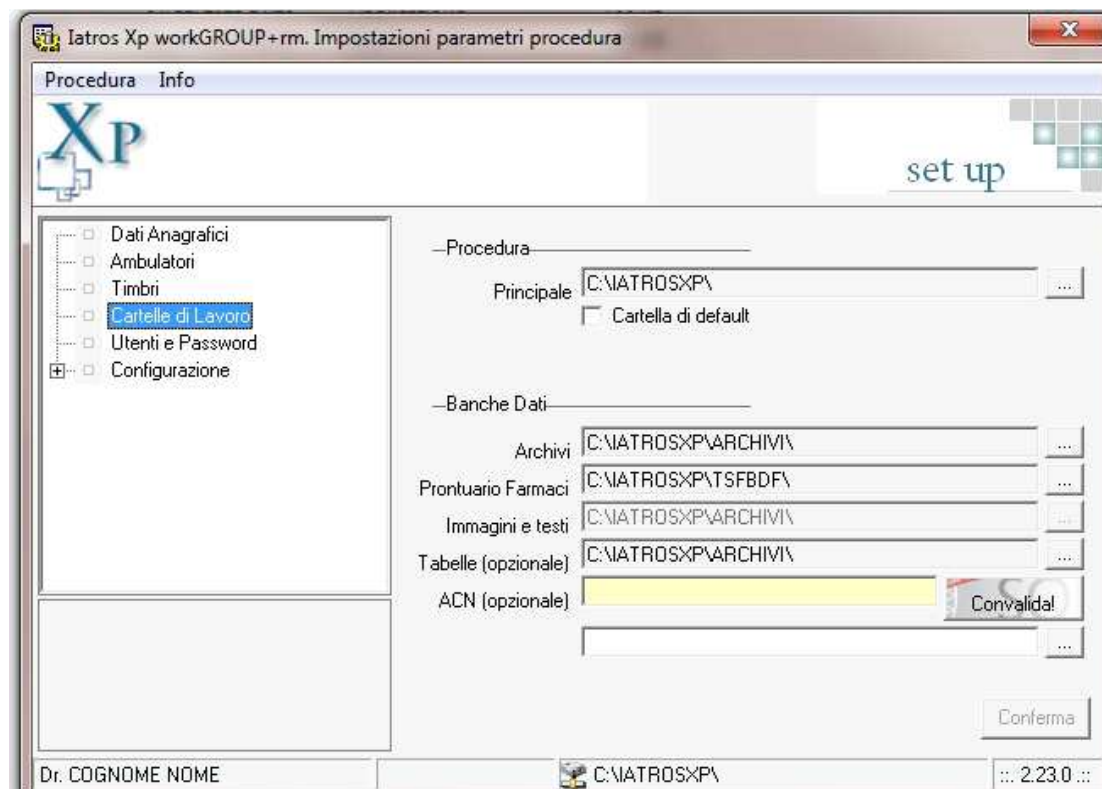

In questo modo si recupera il percorso degli archivi principali, **ma non di tutti quelli aggiuntivi** a cui si può aver accesso tramite la funzionalità passaA di Iatros.


[REV.12122013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112


TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.



Cercare nel filesystem locale il file PRESCRIZ.BTR in cerca di eventuali altri set di archivi utilizzati nel PC.

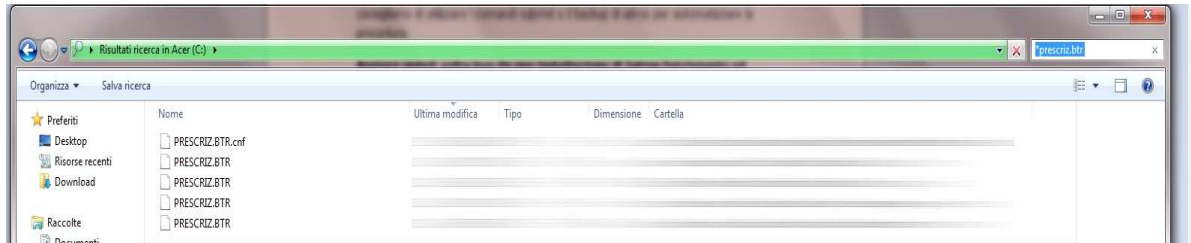

Eseguire poi la copia dal vecchio PC della cartella principale di Iatros e posizionare gli archivi nella medesima posizione del vecchio PC. Se si cambia posizione agli archivi, occorre lanciare il programma di setup (i32\_setup.exe) per aggiornare i percorsi.

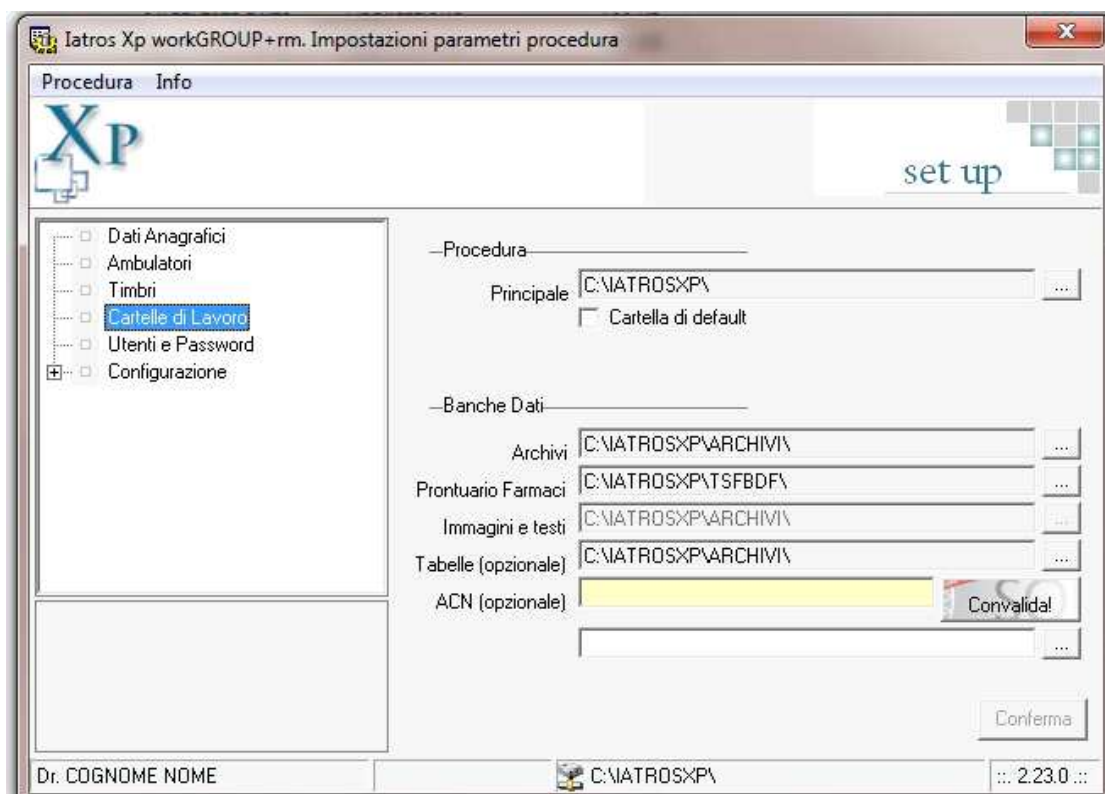

[REV.12122013RB]

## Fase aggiuntiva per IATROS DOGE/IATROS+ACN

### **I dati ACN sono immagazzinati nel database Microsoft SQL Server.**

Sebbene sia possibile anche la copia fisica dei files con relativo attach/detach si consiglia di utilizzare i comandi sqlcmd o il backup di Iatros per automatizzare la procedura.

Avviare quindi **xpBackup** da una installazione di Iatros funzionante ed assicurarsi di effettuare il backup minimo ( **Set I** ) in una locazione noto (es. desktop). Tale backup farà una copia anche di ACN.

### **Installare il nuovo pc incluso Iatros e SqlServer2008R2sp2.**

**Sovrascrivere la cartella \IatrosXp del PC nuovo con quella "vecchia" a meno della sottocartella IatrosXp\SQLIATROS e del suo contenuto (verrà ripristinata con il restore ACN).**

Nella temp del vecchio PC individuare il file più nuovo tra gli XPP\*.zip che contiene il setup .msi delle librerie IATROS NET. Eseguire l'installer a 32 o a 64 bit a seconda del sistema operativo.

Avviare xpBackup dal nuovo PC ed eseguire il **restore**. Sarà sufficiente selezionare solo il ripristino di ACN (**non ci sono comunque problemi se viene effettuato un restore completo**).



[REV.12122013RB]

Nel caso in cui il **backup sia stato effettuato prima della giornata lavorativa**, potrebbe essere necessario utilizzare degli NRE nuovi: seguire pertanto la procedura di **azzeramento NRE** ( necessario intervento di assistenza ).

All'avvio il programma chiederà di essere **attivato** ( necessario intervento di assistenza ).

[REV.12122013RB]

TSF s.r.l. via Galvani 6/C, 31027 Spresiano (TV) - PI. 03552630265 - Sito internet: [www.iatros.it](http://www.iatros.it) - Mail: [info@tsfnet.com](mailto:info@tsfnet.com) - Tel: 0422.724.193 - Fax: 0422.522.112

TSF s.r.l. Azienda con Sistema Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2008 per Sviluppo software di gestione attività del medico.

### Metodo alternativo di ripristino DB SQL con IatrosManager (per operatori)

Verificare che la versione NETLine sia allineata con la versione di Iatros installata: tale controllo serve per non avere errori di DAC non allineato. Il controllo può essere fatto avviando Iatros o IatrosManager.

Verificare che nella root di Iatros non sia presente la cartella SQLIATROS con all'interno un database mdf. Il percorso di default è C:\iatros\_Xp\SQLIATROS\iatros.mdf.

In caso affermativo rinominarla: **se nella cartella SQLIATROS è presente il database iatros.mdf, il setup di Iatros\_NETLine non andrà a buon fine neanche in modalità ripara.**

NOTA: la presenza di tale database indica che è stato copiato il contenuto della cartella Iatros dal vecchio al nuovo PC, *ma che non è stato precedentemente installato il pacchetto NETLine.*

Eseguire a questo punto il setup di Iatros NETLine.

Se viene restituito un errore, tale problematica potrebbe essere imputabile a SQL Server: *si raccomanda allora di disinstallare e reinstallare Sql Server.*

Se l'installazione va a buon fine, il nuovo PC è predisposto all'uso del database iatros.mdf che il setup ha creato dentro la cartella iatrosxp\SQLIATROS. **Questo database è vuoto e dovrà essere cancellato, ma prima occorre eseguire il detach di tale database.**

Apriamo quindi IatrosManager:

- 1- nella linguetta "**Connect**", collegarsi all'istanza di default.
- 2- nella linguetta "**Database**", selezionare **IATROS** (il database appena creato) e clic su **detach**.

E' ora possibile spostare/cancellare/rinominare la cartella contenente il database detachato.

**Copiare la cartella SQLIATROS (ed il relativo contenuto) dal vecchio PC al nuovo PC nel percorso appropriato di installazione di IATROS.**

Se all'interno è presente un solo file mdf, prendere nota di tale nome e in aggiunta del nome del rispettivo log. Altrimenti sarà necessario segnarsi il nome del file con la versione DAC che è stata installata con il pacchetto NETLine (ad oggi la 1.13.0.0).

Ora da IatrosManager eseguire i seguenti passi. Nella linguetta "**Database**" riempire i percorsi della zona attach e clic su **attach**.

Un OK indicherà se l'operazione è andata a buon fine.

[REV.12122013RB]